

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ


ТРАКЦИОННЫМ
МАССАЖЕРОМ ДЛЯ ШЕИ

MEDI NECK



MYTREX

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

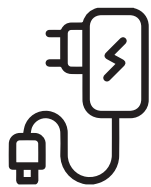

Подключите провод питания адаптера, прилагаемого в комплекте прибора, к разъему питания прибора. Плотно и до конца вставьте разъем в гнездо прибора. Подключите адаптер к розетке 220В 50Гц. На пульте управления загорится белый светодиод. Это сигнализирует о том, что питание подключено и прибор находится в режиме ожидания.




подушка
для головы

электроды
нагрева и ЭМС


надувная
подушка

подвижная
часть

разъем
питания

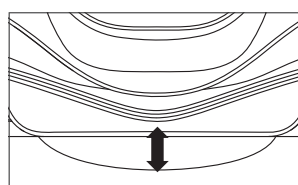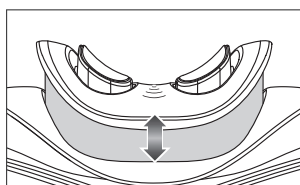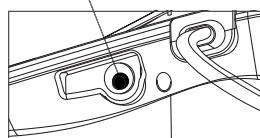

нижняя часть
центрального блока

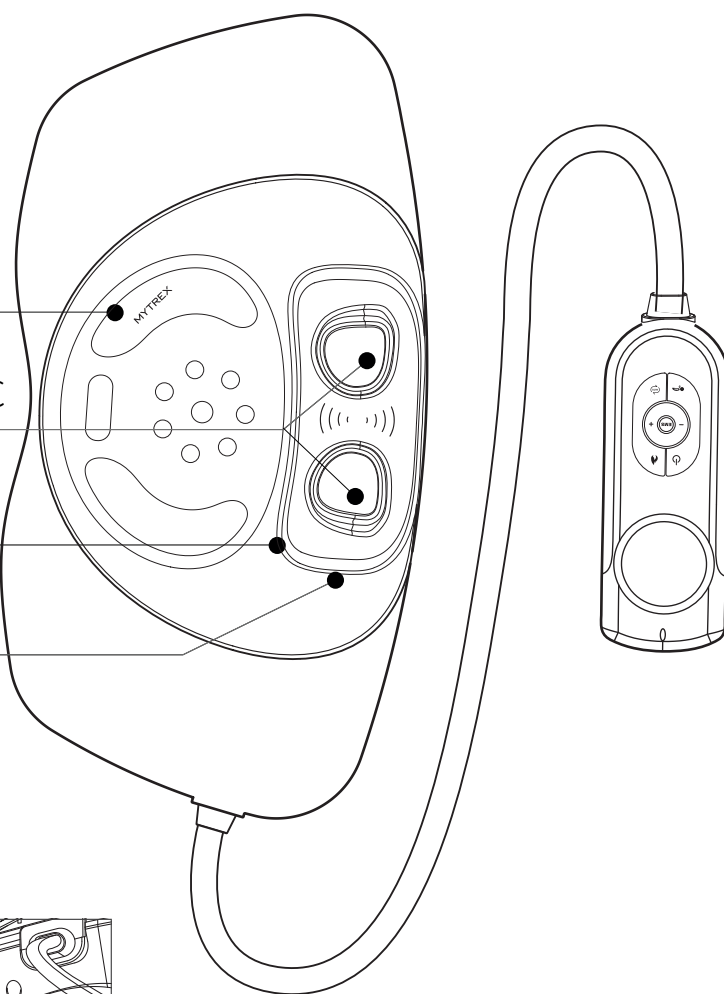

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

функция «лифт»

функция «нагрева»

функция ЭМС

уровень ЭМС

экран
автоматических
программ

кнопка «вкл/выкл»


кнопка нагрева

кнопка ЭМС


кнопка +/-
выбор уровня
воздействия ЭМС

функция «лифт»


кнопка выбора
автоматической
программы

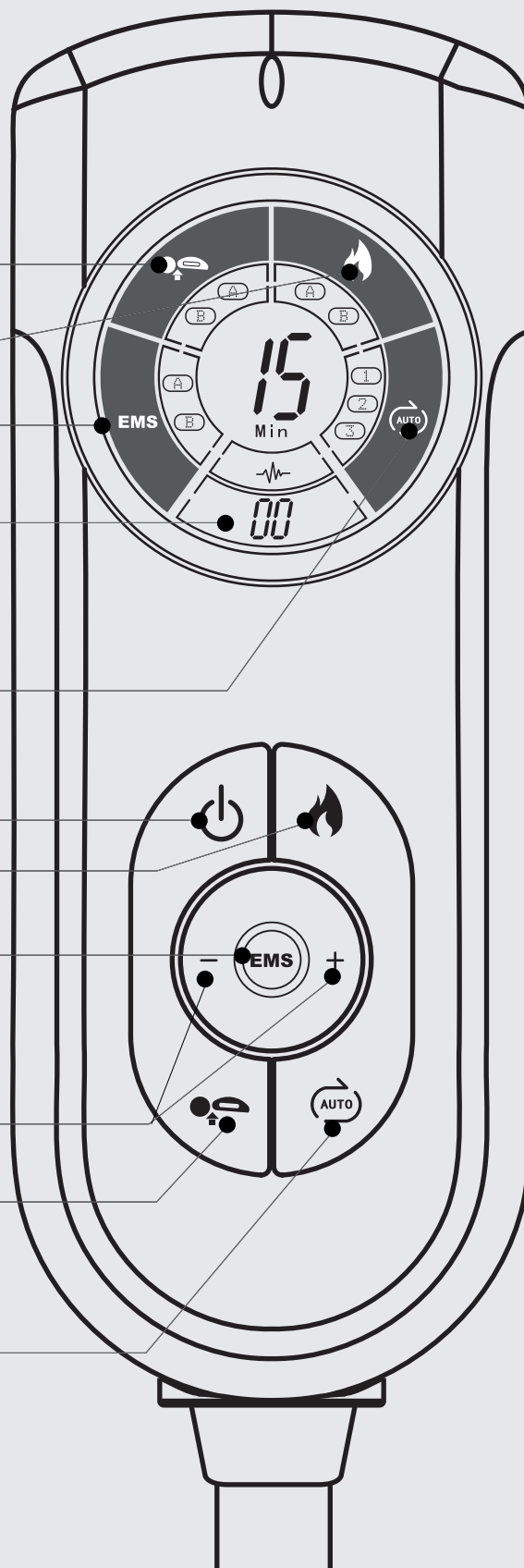


Ложитесь так, чтобы электроды касались кожи с левой и правой стороны шеи, как показано на рисунке. Если вы не чувствуете воздействия ЭМС, увлажните кожу в местах контакта с электродами теплой водой. Если вы используете только функцию нагрева и не пользуетесь ЭМС, то увлажнение не обязательно. Если у вас длинные волосы, проследите, чтобы они не мешали электрическому контакту между электродами и кожей.

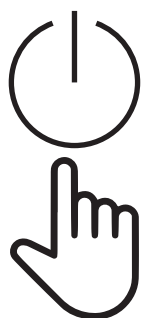

Нажмите кнопку «вкл/выкл» для включения прибора. Экран прибора загорится и начнется обратный отчет с 15 минут. Если в течение 5 минут после включения прибора не будет нажата ни одна кнопка на панели управления, то прибор отключится автоматически.

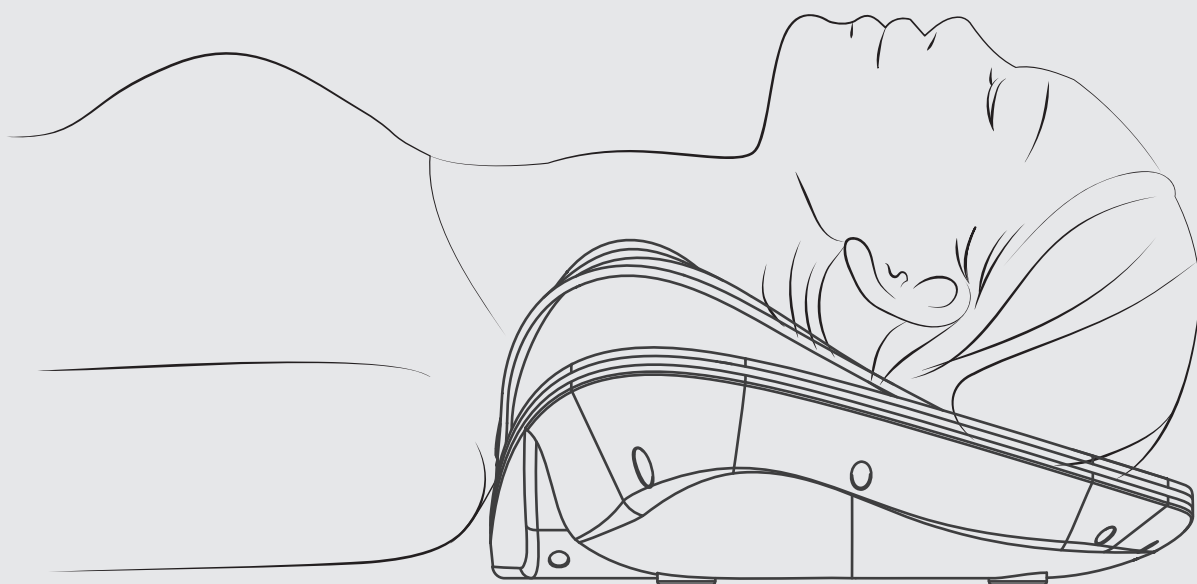

Выберите предпочитаемый режим на панели управления. На экране отобразится символ выбранного режима и начнется процедура.

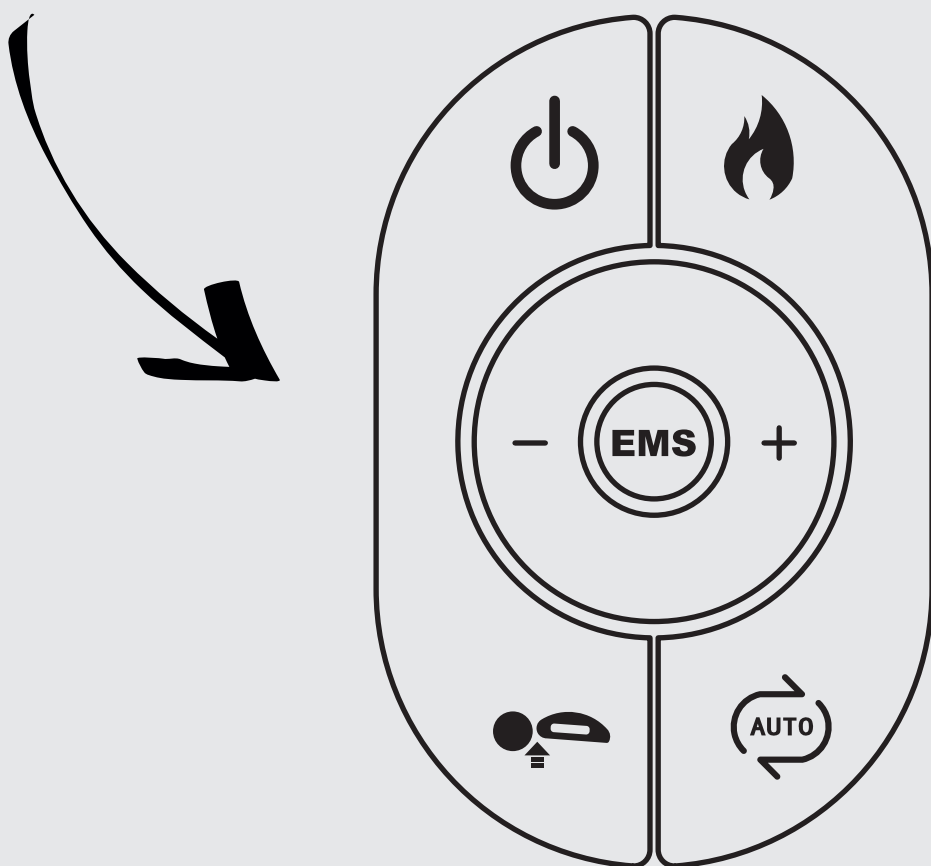

1

ФУНКЦИЯ ЛИФТ



Нажмите. Каждое нажатие переключает режим «лифт» по схеме:



режим «лифт» выключен - экран пуст)



расслабляющий массаж

мягко повторяет движение подъема вверх и вытягивания задней части шеи по диагонали вверх



массаж Шиатсу

поднимает шею и воспроизводит ощущения нажатия, расслабляя мышцы шеи



тренировочный режим

двигает шею с большей амплитудой, поднимая и вытягивая ее.
Каждый период воздействия чередуется с 1,5 минутами отдыха

2

ФУНКЦИЯ ЭМС

EMS

Нажмите. Каждое нажатие переключает режим «ЭМС» по схеме:



режим «ЭМС» выключен - экран пуст)



режим нажатий (от 2Гц до 43Гц)

воспроизводит ощущения массажа
шеи с помощью легких нажатий



разминающий режим (от 2Гц до 43Гц)

воспроизводит ощущения массажа,
разминающего мышцы шеи



пощипывающий массаж (85Гц)

воспроизводит ощущения массажа
с легким пощипыванием

3

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВ



Нажмите. Каждое нажатие переключает режим «Прогрев» по схеме:



нагрев выключен (экран пуст)

A

слабый нагрев

нагрев приблизительно
от 37 до 39°C

B

средний нагрев

нагрев приблизительно
от 38 до 41°C

A

B

сильный нагрев

нагрев приблизительно
от 40 до 43°C

4

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



Нажмите. Каждое нажатие переключает программу по схеме:

1 → **2** → **3** →

авто программа выключена (экран пуст)
выбор программы 1 или 2 включает функцию ЭМС. В этих режимах можно регулировать уровень воздействия ЭМС кнопками «+» и «-»

1

подъем+ЭМС + нагрев

функция «лифт», режим **A**,
функция ЭМС, режимы **A** **B**
и прогрев режим **B**

2

подъем + ЭМС + нагрев

функция «лифт», режим **B**,
функция ЭМС, режимы **A** **B**
и прогрев режим **B**


3

подъем + прогрев

функция «лифт», режимы **A** **B**
и функция прогрев **B**


Прибор автоматически выключится
через 15 минут после включения.
Не лежите на приборе после проведения
процедуры, не используйте его как подушку.

После окончания работы отключите адаптер
от электросети.

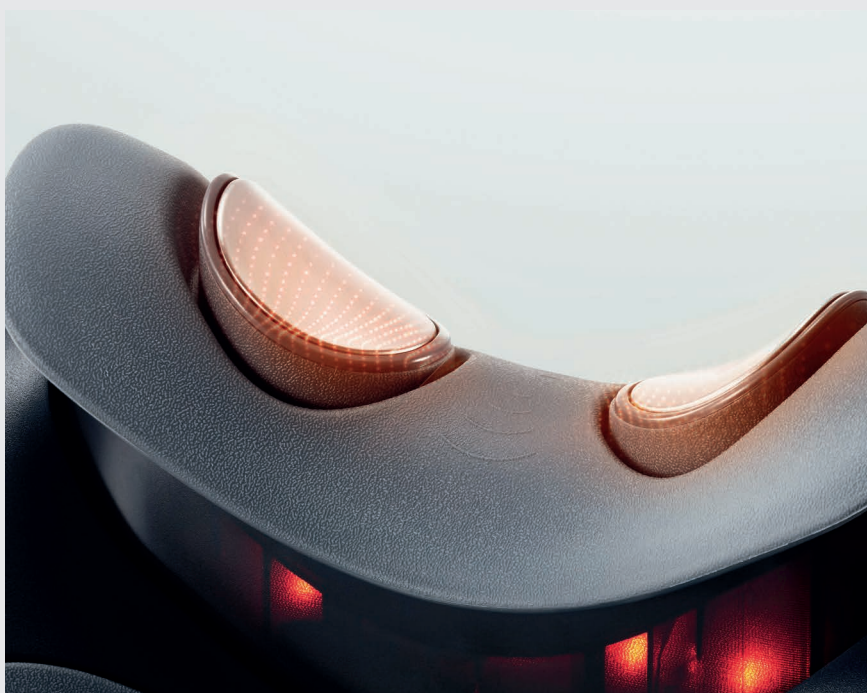

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

для достижения максимально эффективного результата рекомендуем использовать контактный токопроводящий гель. Гель необходимо нанести тонким слоем на область задней поверхности шеи в зоне контакта с электродами.

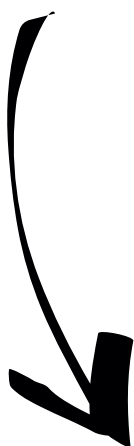

Гель активный
с экстрактом
икры и морским
коллагеном,
Beauty Style,
4501428AR

или




Контактный гель
для лазерной
и RF коррекции кожи,
Beauty Style,
4501426AR



Для достижения
максимальной эффективности
при использовании
аппарата ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
КОСМЕТИКУ



Хотите узнать больше
о возможностях
вашего аппарата
и его функциях?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРОГРАММОЙ КРАСОТЫ,
РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

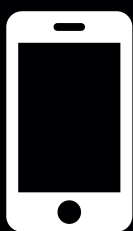

Наведите камеру на QR код
и Вы получите видеоинструкцию
и персональную программу
красоты для Вашей кожи
от косметологов Mytrex

