

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ


АППАРАТ ДЛЯ ЛИФТИНГА ЛИЦА  
И УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

## PROVE




# MYTREX

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

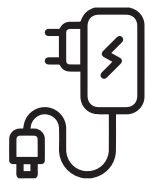

перед началом процедуры зарядите батарею прибора. Для этого поместите прибор на зарядную станцию, так чтобы контакты на приборе и зарядной станции совпадали. Во время зарядки индикатор будет показывать уровень заряда батареи, будет мигать сегмент, соответствующий уровню заряда

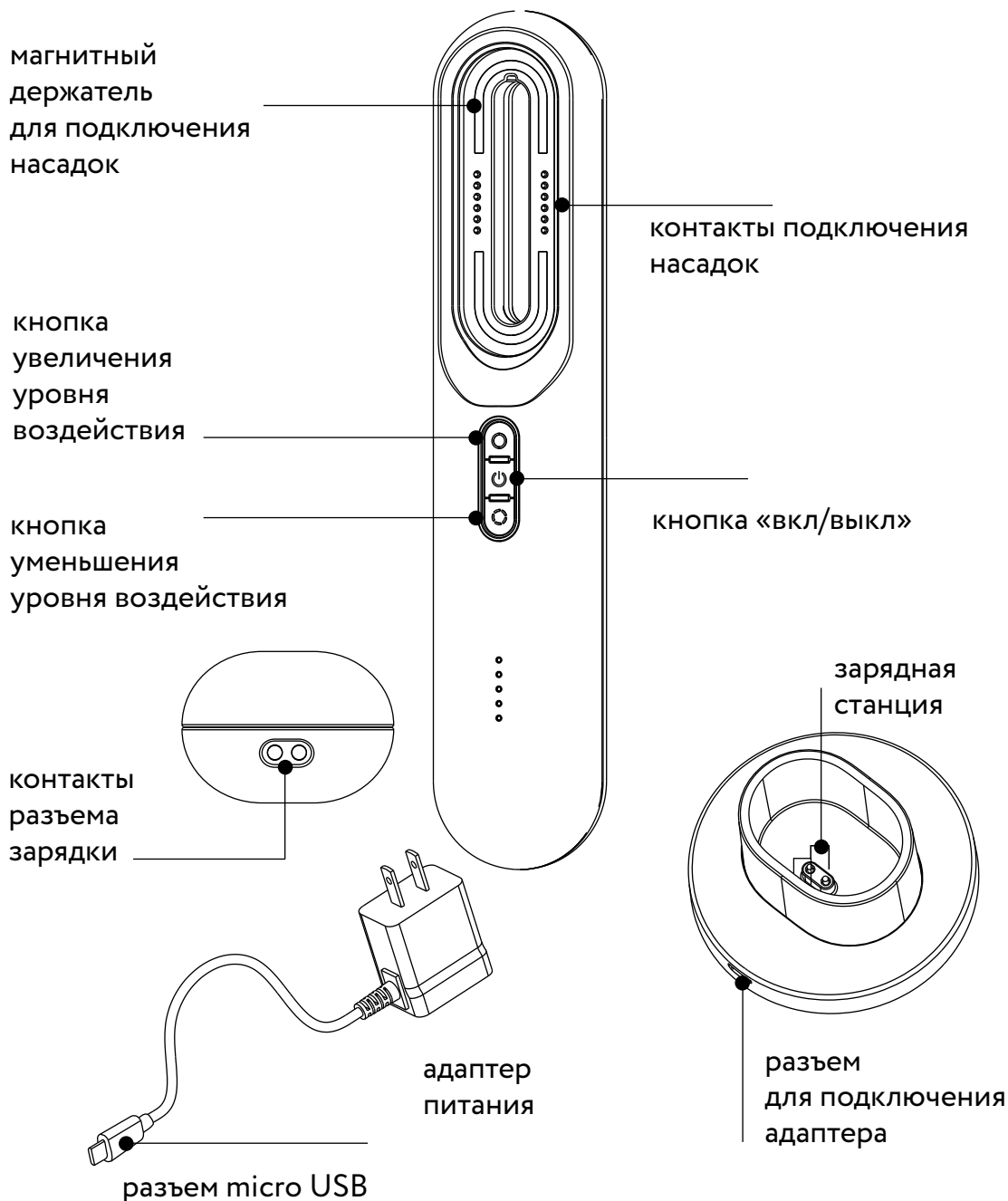

# 1

## ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ/ ДЕМАКИЯЖ



Увлажняющая пенка  
для демакияжа АКВА 24,  
Beauty Style, 4515701K

**КУПИТЬ**

**ЗАВЕРШИТЕ  
ОЧИЩЕНИЕ**

Увлажняющий  
тоник АКВА 24,  
Beauty Style,  
4515702K



очистите кожу используя  
увлажняющую пенку  
для демакияжа



нанесите при помощи  
ватного диска  
на кожу лица и шеи

**КУПИТЬ**

# 2


## ПОДТЯЖКА И ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА

при проведении процедуры используйте насадку для лица




Гель для лица с экстрактом икры, **Beauty Style**, 4504006K

**КУПИТЬ**

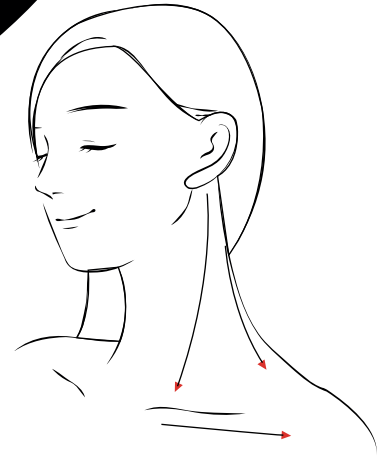

уход за кожей шеи и плеч начните с ключиц, продвигаясь в сторону плеч, также проводите прибором с задней стороны ушей в сторону ключиц

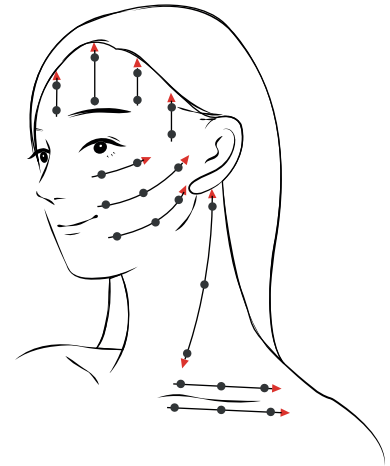


для точечного ухода прислоняйте устройство на черные точки на 3-5 секунд каждую. Повторите всю последовательность в течение 2-4 минут




при проведении процедур по уходу за кожей лица двигайте прибором по направлению от нижней части подбородка и линии улыбки в сторону ушей. А также в районе лба в сторону линии роста волос

✓ при проведении процедур на лице не надавливайте на электроды слишком сильно

# ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

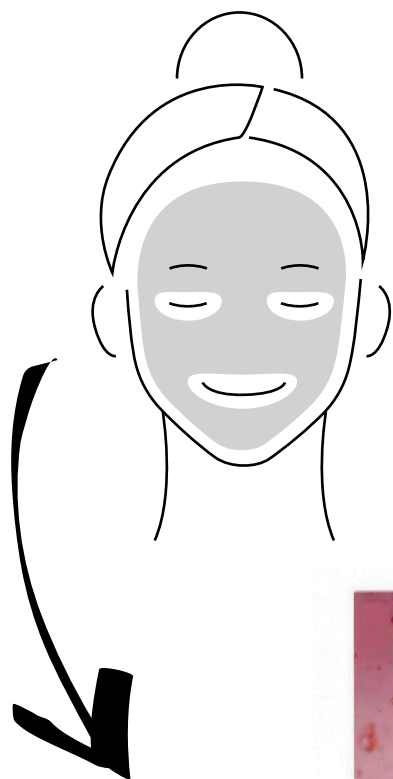

после интенсивного ухода  
необходимо сохранить влагу  
и обеспечить коже надежную защиту  
от внешней агрессии

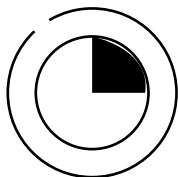

Омолаживающая  
тканевая маска  
с пептидами  
упругость и тонус,  
**Beauty Style**  
4515958K

**КУПИТЬ**

нанесите дневной омолаживающий крем  
массажными движениями



Дневной омолаживающий крем  
"Матриксил",  
**Beauty Style**, 4515960K


**КУПИТЬ**

# 3


## УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

при проведении процедуры  
используйте насадку-расческу


---

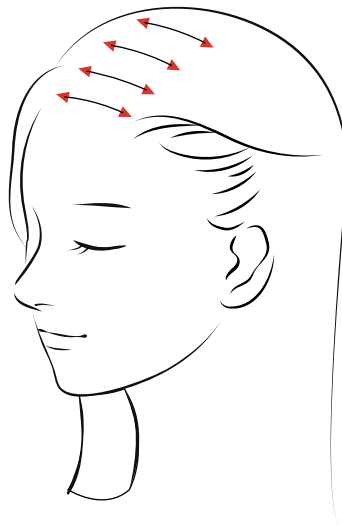

на передней и верхней части головы  
передвигайте прибор зигзагообразными  
движениями

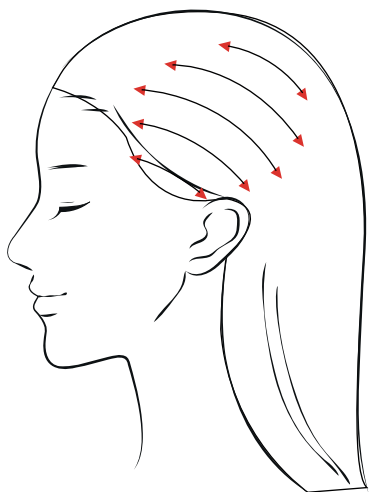

по бокам головы начните от линии  
роста волос и зигзагообразными  
движениями продвигайтесь к затылку

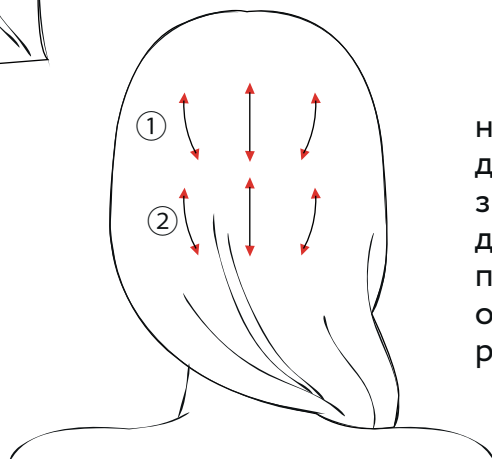

на задней части головы  
двигайте прибор  
зигзагообразными  
движениями  
по направлению  
от затылка к ключицам,  
разделяя волосы

# 4+

## ПОДТЯЖКА И ОМОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

при проведении процедуры  
используйте насадку для тела



на область проведения процедуры  
нанесите достаточное количество  
контактного токопроводящего геля




Токопроводящий активный гель  
«Боди Лифт Актив»,  
Beauty Style, 4501430AR

**КУПИТЬ**




**ВЕРХНЯЯ  
ЧАСТЬ РУК**

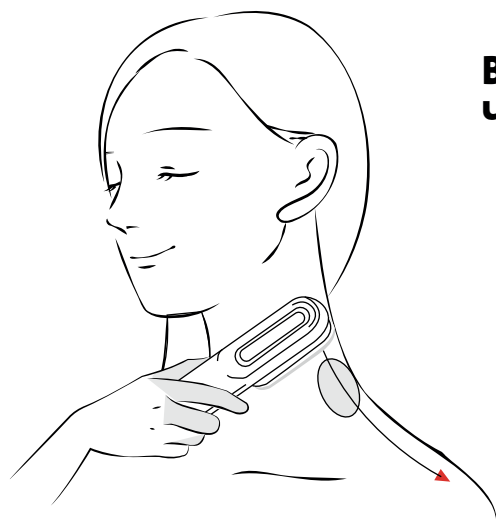


**ПЛЕЧИ**

# 4


## ПОДТЯЖКА И ОМОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

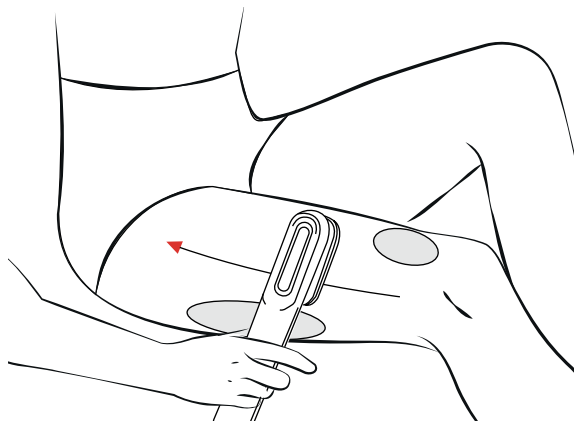


**БЕДРА**

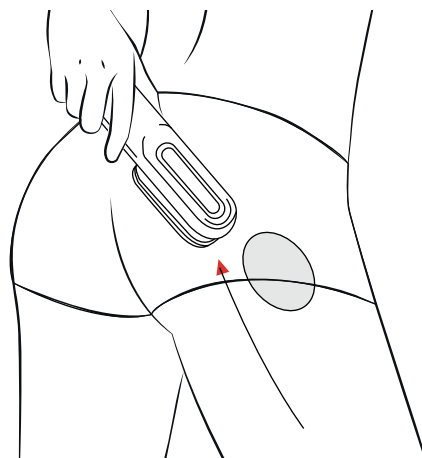

**ЯГОДИЦЫ**

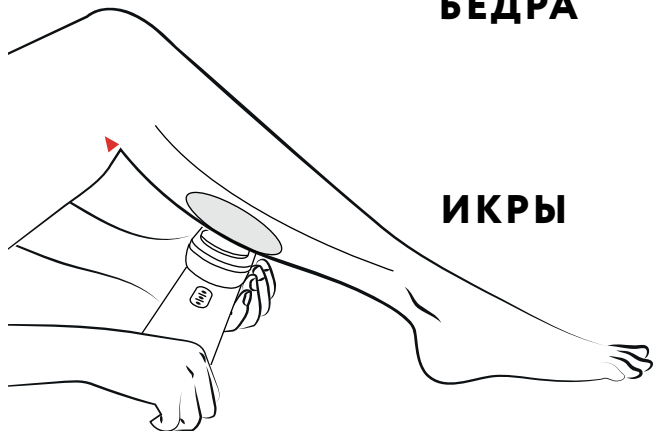


**ИКРЫ**

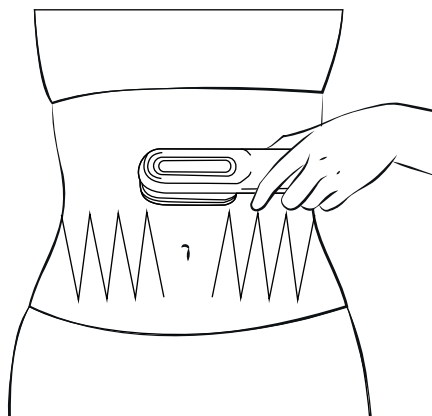

**ЖИВОТ**


- ✓ не используйте гель, содержащий масла, это не позволит провести процедуру
- ✓ водите прибором так, как показано стрелками
- ✓ избегайте попадания на кости ног и запястий

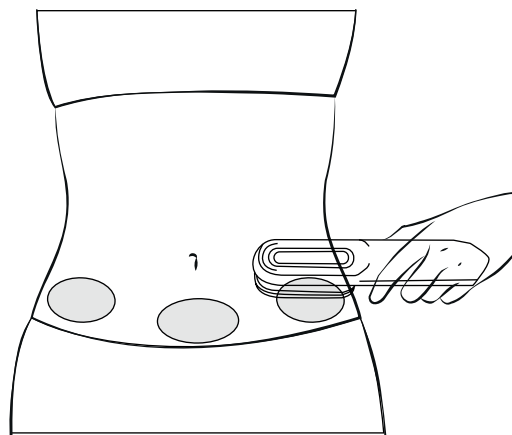

зоны наиболее чувствительные к воздействию ЭМС



# ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

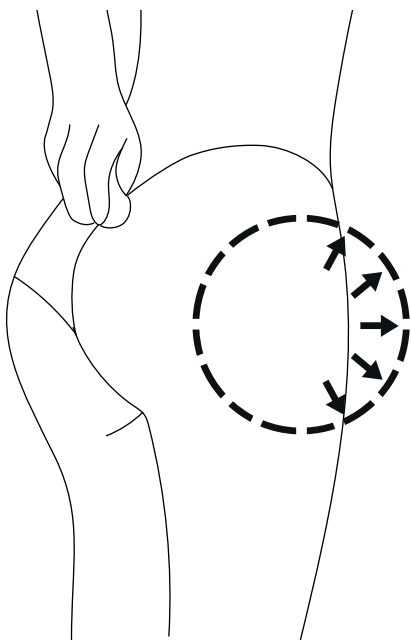

крем наносят массажным  
аппликатором  
круговыми движениями  
на чистую сухую кожу  
в проблемных областях



✓ *рекомендуется  
использовать  
2 раза в день после  
ванной или душа.  
минимальный  
рекомендуемый курс -  
2 месяца*

Крем антицеллюлитный  
с массажным аппликатором  
«Body Sculptor»,  
**Beauty Style,**  
4501820K

**КУПИТЬ**