

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ


ПРЕМИАЛЬНЫМ МИОСТИМУЛЯТОРОМ  
ДЛЯ ЯГОДИЦ AQUALIFT

## AQUA LIFT




# MYTREX

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

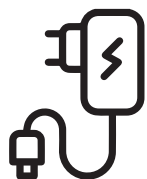

откройте крышку, закрывающую разъем зарядки и подключите зарядное устройство. Не тяните защитную крышку! Во время зарядки аккумулятора индикатор будет мигать красным цветом. По окончании зарядки индикатор загорится синим цветом. Если вы помещаете устройство в ванную, убедитесь, что защитная крышка плотно закрыта.

## ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМС

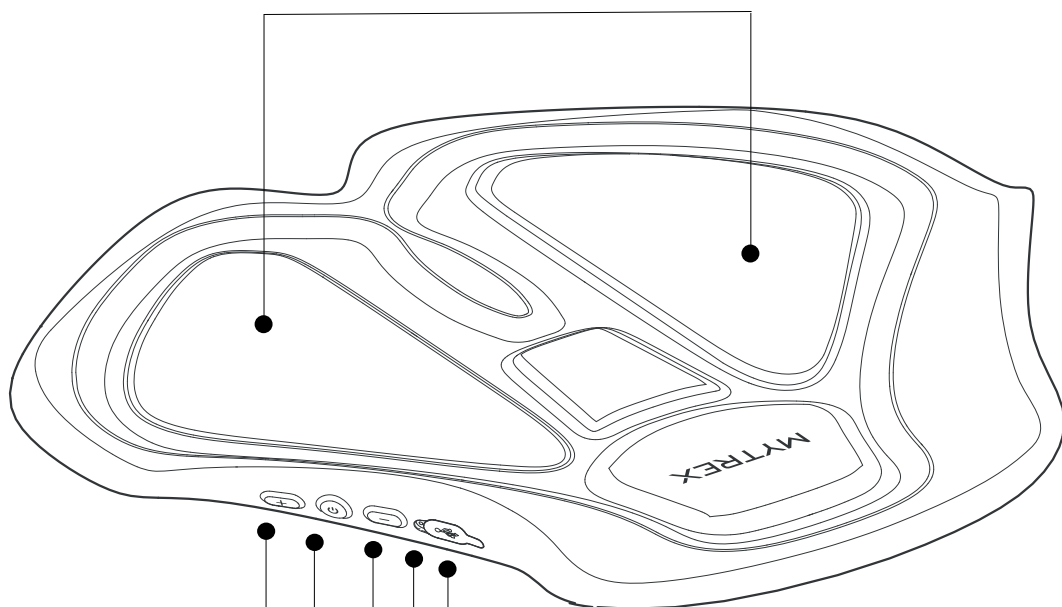

### разъем зарядки

разъем закрыт резиновой крышкой, не допускающей попадание влаги на электрические контакты

### светодиодный индикатор

в процессе работы и зарядки цвет индикатора меняется

### кнопка уменьшения уровня воздействия

нажмите на кнопку, чтобы уменьшить уровень воздействия

### кнопка «вкл/выкл»


нажмите и удерживайте для включения/выключения прибора

### кнопка увеличения уровня воздействия


нажмите на кнопку, чтобы увеличить уровень воздействия

# РЕЖИМ ЭМС

Прибор может использоваться в ванной.  
Поместите прибор под ягодицы, ступни или бедра и убедитесь,  
что зона воздействия ЭМС контактирует с кожей

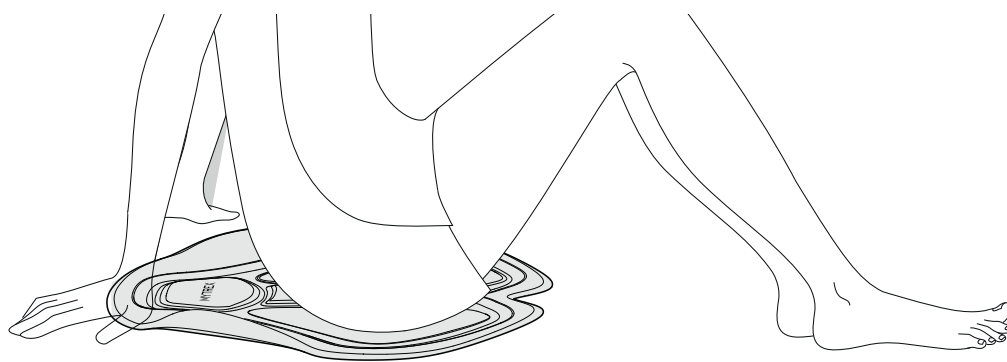


## НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЯГОДИЦ

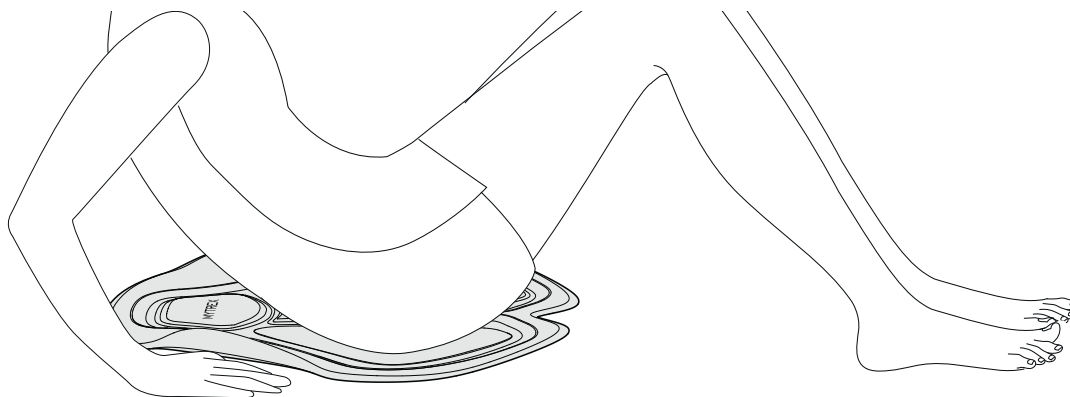

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЯГОДИЦ


# РЕЖИМ ЭМС

нажмите и удерживайте кнопку «вкл/выкл» около 2 секунд. Прибор издаст звуковой сигнал и завибрирует, что свидетельствует о начале процедуры на минимальном уровне воздействия

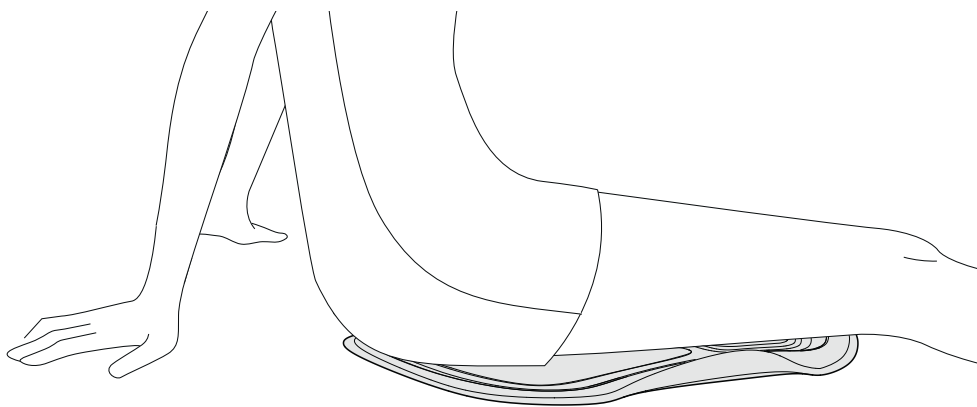


## ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕДЕР

зона воздействия ЭМС покрыта карбоновым напылением для токопроводности, поэтому если кожа в местах соприкосновения с зоной воздействия ЭМС прибора потемнеет, **просто промойте её водой**

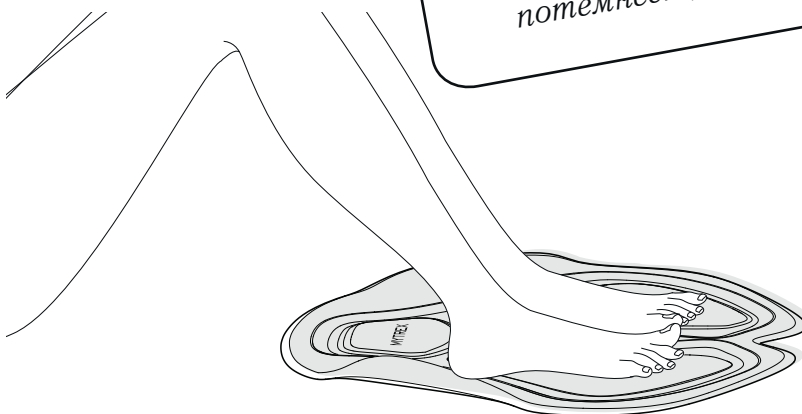

## ПОДОШВЫ НОГ

# ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

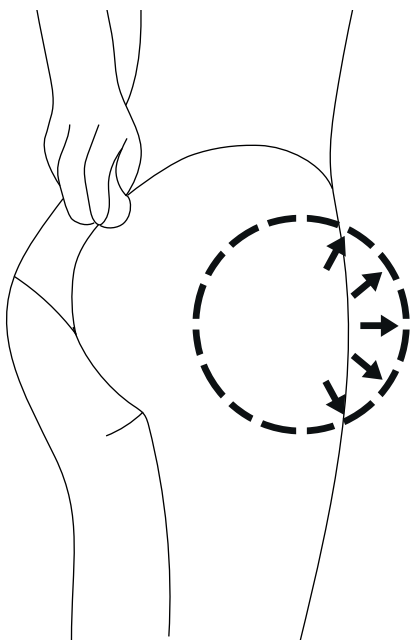

крем наносят массажным  
аппликатором  
круговыми движениями  
на чистую сухую кожу  
в проблемных областях



✓ *рекомендуется  
использовать  
2 раза в день после  
ванной или душа.  
минимальный  
рекомендуемый курс -  
2 месяца*

Крем антицеллюлитный  
с массажным аппликатором  
«Body Sculptor»,  
**Beauty Style,**  
4501820K

**КУПИТЬ**