

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ ДЛЯ ЛИФТИНГА
И ФОТООМОЛОЖЕНИЯ
MIRAY ONE



MYTREX


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

MYTREX MiRAY ONE – аппарат для лифтинга и омоложения кожи лица и шеи.

Сочетание световой терапии (DPL/NiR), миостимуляции (EMS) и ионных технологий (IN/OUT) помогает укрепить овал, разгладить морщины, выровнять тон и вернуть коже упругость и сияние.

Перед использованием аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией и перечнем противопоказаний.

Входное / выходное отверстие для воздуха

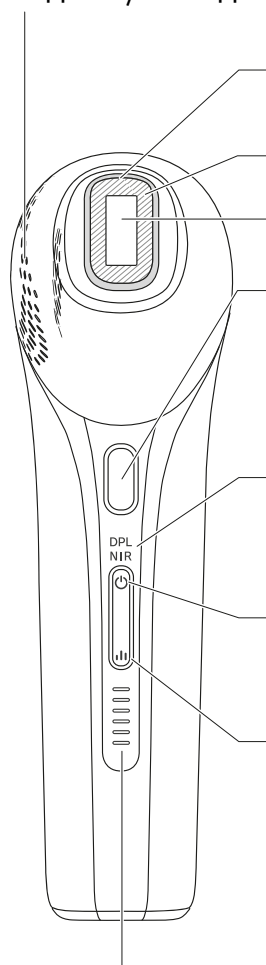

Детектор кожи. При контакте с кожей загорается синим светом

Датчик касания (штрихованный)

Окно излучателя
(В режиме DPL охлаждается, в режимсе NiR нагревается)

Кнопка вспышки (O)

- Короткое нажатие вызывает одиночную вспышку
- Нажмите и удерживайте кнопку вспышки около 3 сек для того, чтобы перейти в режим непрерывных вспышек. Нажмите кнопку еще раз или прервите контакт прибора с кожей для выхода из режима непрерывных вспышек.

Индикатор режима работы

Режим переключается каждый раз при нажатии на кнопку питания (⏻)

DPL Mode ↔ NIR Mode

Кнопка "вкл/выкл/переключение режимов"

- Долгое нажатие (около 3 сек) включение/выключение прибора
- Короткое нажатие переключение режима. (⏻)

Кнопка выбора уровня (III) | Работает в каждом из 2 режимов

Вы можете выбрать 3 уровня излучения

Каждый раз, нажимая кнопку, (III) уровень меняется.


Вы можете определить, какой уровень выбран, по цвету подсветки.

Уровень	Цвет	Уровени излучения
Уровень1	Голубой	Низкий
Уровень2	Белый	Средний
Уровень3	Оранжевый	Высокий

Вы можете приблизительно оценить время, оставшееся до конца процедуры с помощью индикатора таймера.


Время проведения процедуры (настройка таймера) варьируется в зависимости от выбранного уровня.

По окончании процедуры таймер сбрасывается, светодиоды с 1 по 6 загораются.

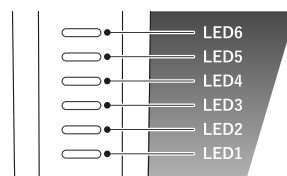

Конец процедуры

Оставшееся время

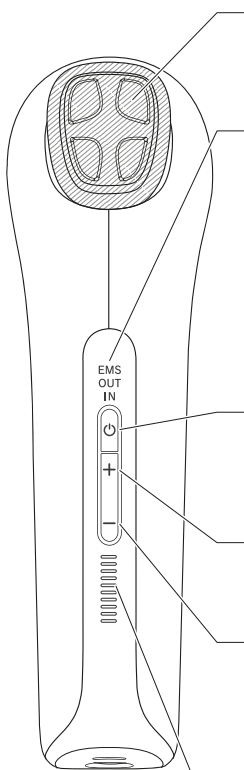

Излучатель импульсов (▨)

※ Не допускайте попадания жидкости (воды, геля и т.д.) на электроды, это может привести к выходу прибора из строя

Индикатор режимов работы.

Вы можете выбрать 1 из 3 режимов

Режим работы переключается при каждом нажатии на кнопку "вкл/выкл/переключение режима".

В режиме EMS можно выбрать 1 из 10 уровней воздействия, в режимах IN и OUT уровень постоянный



Кнопка "вкл/выкл/переключение режима"

- Долгое нажатие (около 3 сек) включение/выключение прибора
- Короткое нажатие переключение режима.


Кнопка увеличения уровня (+)

Каждое нажатие увеличивает уровень



Кнопка уменьшения уровня (-)

Каждое нажатие уменьшает уровень

Индикатор уровня воздействия EMS (10 уровней).
Выбирайте уровень воздействия нажатиями кнопок (+ / -)

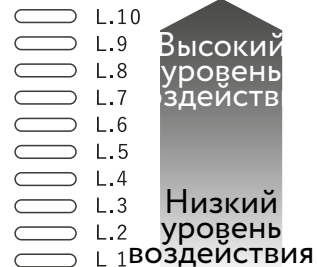


• Кольцо для фиксации ватного диска
Магнитное кольцо фиксирует ватный диск на электродной секции. Кольцо закреплено на электродной секции при поставке.

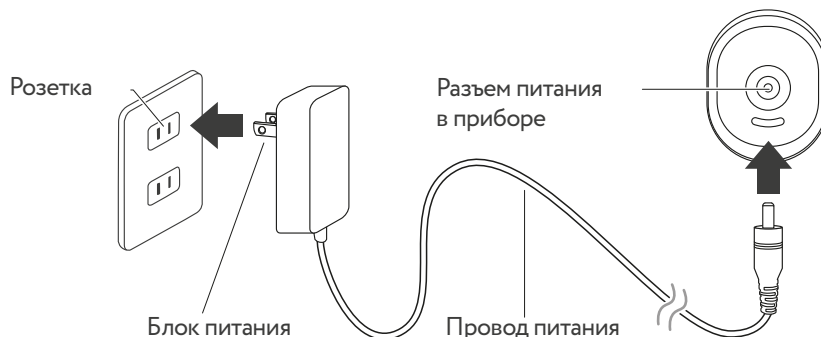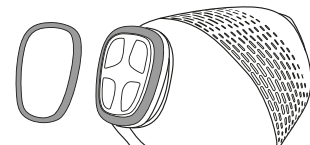

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ

Режим	Ежедневный уход				Ежедневный уход
	DPL	NIR	EMS	IN (ионное увлажнение)	OUT (ионное очищение)
Рекомендуемая косметика	Не подходит для применения с косметикой		Косметика Тканевая маска	Косметика Сыворотка Тканевая маска	Косметика Тканевая маска
Время проведения процедуры	Примерно от 4 до 15 мин		Около 10 мин	Около 3 мин	Около 3 мин
Уровни воздействия	3 уровня		10 уровней	1 уровень	1 уровень
Частота использования	Ежедневное использование 1 из режимов (либо DPL, либо NIR)		По возможности ежедневно		3-4 раза в неделю

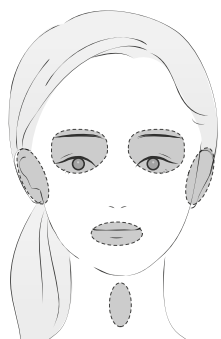

Области, которых следует избегать при обработке световым излучателем:
уши, губы, веки, область вокруг глаз и гортань.




Интенсивный курс 4–6 недель
Поддерживающий курс 1 – 2 недели
После полного курса рекомендуется перерыв 2-3 месяца

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ

Перед использованием аппарата необходимо очистить кожу от макияжа и внешних загрязнений. Не используйте для очищения абразивные, спиртовые, ферментативные средства или препараты с АНА, ВНА, РНА кислотами.




Очистите кожу используя увлажняющую пенку для демакияжа. Нанесите небольшое количество на лицо и шею, очистите кожу, остатки смойте теплой водой.

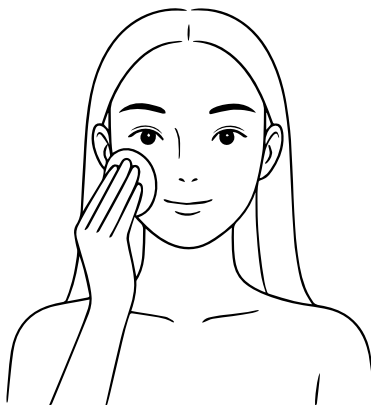

Завершите очищение тоником, нанесите при помощи ватного диска на кожу лица и шеи.

РЕЖИМ OUT ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

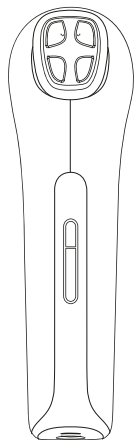

Удаление загрязнений и остатков косметики с поверхности кожи с помощью ионов.


Частота процедур – не чаще 3-4 раз в неделю.

Процедура проводится с использованием аппаратной косметики или тоника.

Проводить процедуру по сухой коже запрещено.
Не используйте скрабы, средства на основе масел, эфирных масел, спирта, АНА, ВНА, РНА кислот, ферментов.

Снимите все украшения, пирсинг, контактные линзы.

Пропитайте косметическим средством ватный диск / нетканую салфетку и закрепите на аппарате при помощи магнитного кольца.

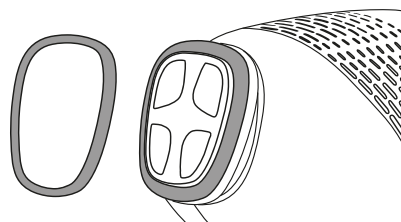


Коротким нажатием на кнопку включения **выберите режим OUT**

В данном режиме уровень интенсивности один.

Во время процедуры аппарат издаёт **короткий виброимпульс 1 раз** в секунду – это ориентир для ритма работы.

РЕЖИМ IN ИОННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

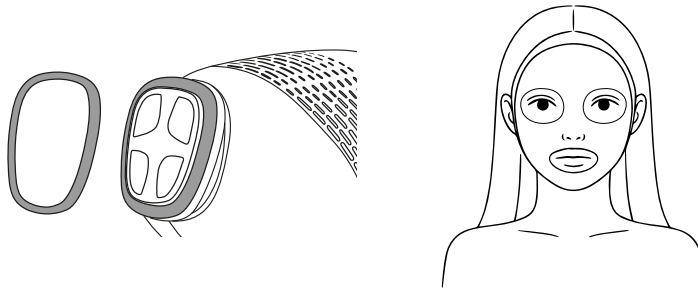


Введение активных компонентов косметических препаратов в кожу при помощи ионов.

Применяется перед режимом EMS и после режимов DPL или NIR. Рекомендуется для максимального увлажнения и быстрого восстанавливающего эффекта.

Процедура проводится с использованием аппаратной косметики или тканевой маски.



Время процедуры IN и OUT:
3 минуты

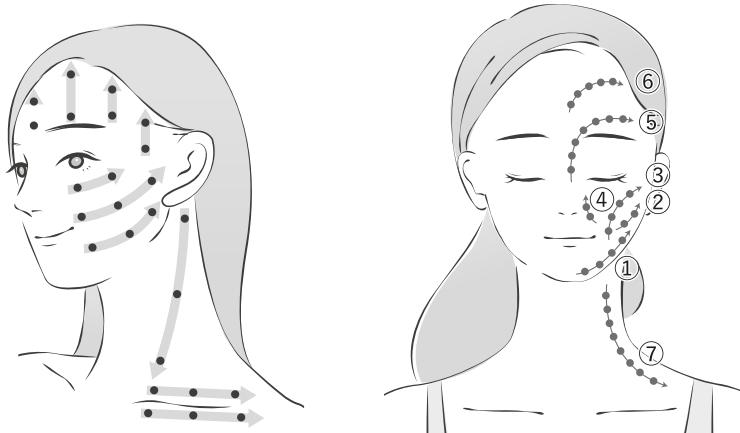


Останавливайтесь на каждой точке по 3-5 секунд, затем двигайтесь по линии. Повторите 2-4 раза каждое движение.

Через 3 минуты аппарат выключится автоматически.

По окончании процедуры, снимите магнитное кольцо и ватный диск, протрите электроды.

РЕЖИМ EMS СТИМУЛЯЦИЯ И ЛИФТИНГ

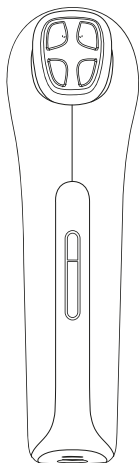

Режим миостимуляции, направленный на укрепление мышц лица и повышение упругости, тонуса кожи. Используется для лифтинга и моделирования овала, сокращения морщин.


Применяется в сочетании с режимами IN и OUT

Не сочетайте в одном сеансе режим EMS и режимы DPL / NIR.


Процедура проводится с использованием аппаратной косметики или тканевой маски.

Проводить процедуру по сухой коже запрещено.

1. Пропитайте косметическим средством ватный диск / нетканую салфетку и закрепите на аппарате при помощи магнитного кольца.

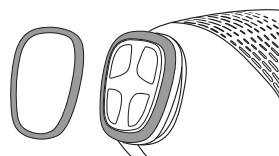

2. Если используете тканевую маску, ватный диск не нужен.

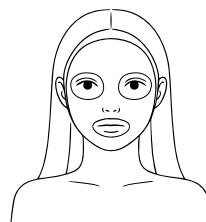


Коротким нажатием на кнопку включения выберите режим **EMS**. Выберите уровень воздействия кнопками «+» и «-».

Во время процедуры аппарат издает короткий виброимпульс 1 раз в секунду - это ориентир для ритма работы.



Время процедуры:
10 минут


Останавливайтесь на каждой точке по 3-5 секунд, затем двигайтесь по линии. Повторите 2-4 раза каждое движение.

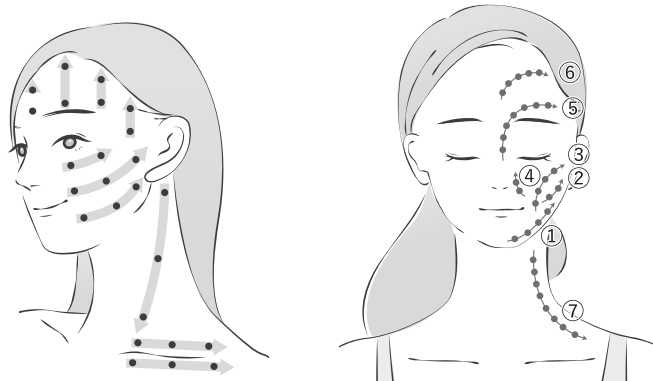

Через 10 минут аппарат выключится автоматически.

По окончании процедуры снимите магнитное кольцо и ватный диск, или снимите маску с лица, протрите электроды.

РЕЖИМЫ DPL / NIR ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

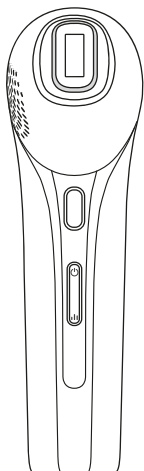

Режимы DPL и NIR используют световые волны разной длины для решения различных косметических проблем, коррекции тона и повышения упругости кожи.

Режим DPL— световая терапия с длиной волны, реагирующей на пигмент и сосудистые изменения. Рекомендуется для осветления, уменьшения пигментации и сосудистой сетки.

Режим NIR – инфракрасное излучение особого спектра, с глубоким прогревом тканей (~40 °С) и видимым лифтинг-эффектом.

**Не используйте оба режима в один и тот же день.
Не сочетайте в одном сеансе режимы DPL / NIR
и режим EMS.**

**Снимите все украшения, пирсинг,
контактные линзы.**

Коротким нажатием на кнопку включения выберите режим.

Выберите уровень воздействия кнопками «+» и «-».

Когда вы начнете процедуру, активируется таймер.



Время процедуры:
4-15 минут



Процедура в режимах DPL / NIR
проводится без использования
косметики



Передняя сторона



Правая сторона




Левая сторона

Меняйте зону воздействия, когда прозвучит голосовая подсказка: «Пожалуйста, смените зону обработки».

ДВИЖЕНИЯ АППАРАТОМ

Убедитесь, что головка излучателя находится в тесном контакте с кожей.

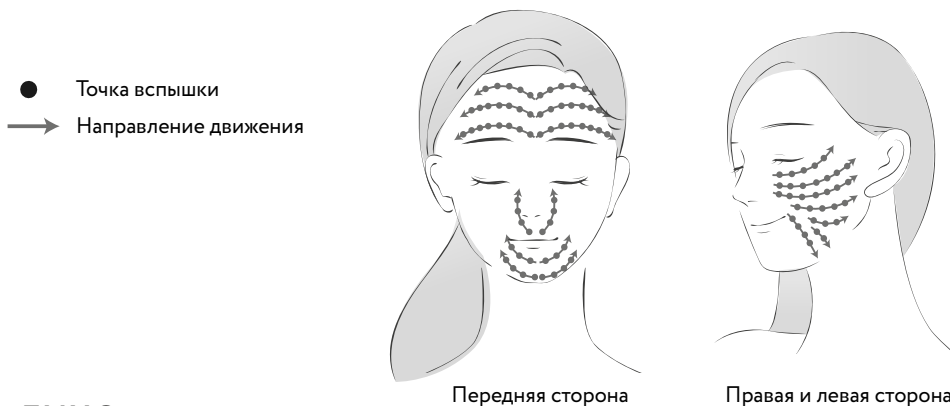


ЛИЦО

Последовательно обрабатывайте переднюю, правую и левую стороны, не пропуская участков.

ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ

Шея: расположите излучатель горизонтально и двигайтесь сверху вниз.

Декольте: расположите излучатель вертикально и двигайтесь от грудины к плечу.

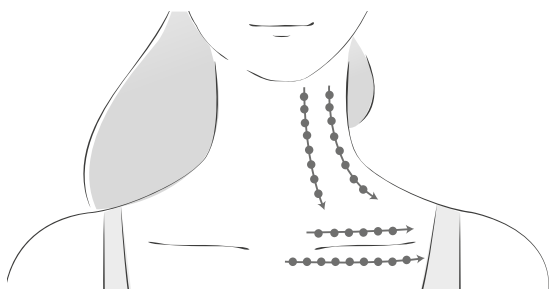

В режиме DPL при обработке одной и той же зоны старайтесь выполнять не более 4 вспышек.

В режиме NIR при обработке одной и той же зоны старайтесь выполнять не более 8 вспышек.

После режимов DPL / NIR проведите сеанс в режиме IN - ионное увлажнение.


ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ



Нанесите тканевую регенерирующую увлажняющую маску.
Обязательно используйте защиту SPF не менее 40 в течение всего курса.



ВРЕМЯ
ЭКСПОЗИЦИИ
20 минут

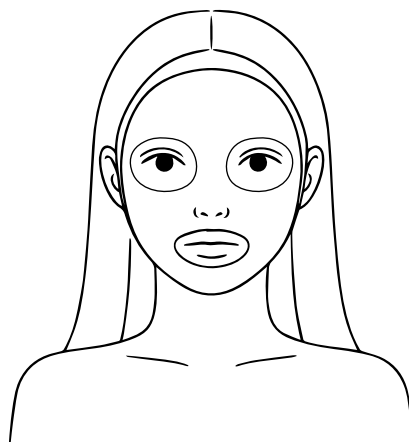

УХОД И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

После того, как вы закончили пользоваться прибором протрите его чистой сухой тканью.

Следите, чтобы вода или другие жидкости не попадали в вентиляционные отверстия или на другие части корпуса.



Не используйте для очистки спирт или другие агрессивные вещества.